

OmniCHROMA Flow BULK

オムニクロマフローバルク

2024

1/22(月)

~3/19(火)

オムニクロマフローバルク 特別セットキャンペーン

オムニクロマ

4g(2.2mL)

標準医院価格
¥4,000



または

オムニクロマフロー
3g(1.8mL)

標準医院価格
¥4,900



+

オムニクロマフローバルク

キャンペーン特別仕様 1g

約 ¥1,600相当



+

オムニクロマ または オムニクロマフローと
オムニクロマフローバルク(1g)を組み合わせ、

特別価格
にてご提供

オムニクロマ 歯科充填用コンポジットレジン (管理医療機器) 認証番号230AFBZX00049000
オムニクロマフロー 歯科充填用コンポジットレジン (管理医療機器) 認証番号302AFBZX00087000
オムニクロマフローバルク 歯科充填用コンポジットレジン (管理医療機器) 認証番号305AFBZX00058000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。 ※価格は2024年1月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。
※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

ご使用の際は必ず注意事項等情報をよくお読みください。

オムニクロマフローバルク 特別セットキャンペーン 注文書

貴歯科医院名	お名前	オムニクロマ+ オムニクロマフローバルク 1g キャンペーン	[10107]	セット
ご住所 〒		オムニクロマフロー+ オムニクロマフローバルク 1g キャンペーン	[10200]	セット
TEL ()		お届け歯科商店名		

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

 0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00

(土日祝日除く)

症例にあわせて選べるペースト

	フロー性	おすすめ
omniCHROMA 	ペースト 	咬合面や前歯等、 形態付与したい症例に
omniCHROMA Flow 	ミディアムフロー  ※2	汎用的なフロー性で、前歯から 臼歯までの幅広い症例に
omniCHROMA Flow BULK 硬化深さ 3.5mm ※1  LED照射器 (800mW/cm ²) 20秒 ※1	ハイフロー  ※2	ハイフローを活かしたV級窩洞の 修復や、I級窩洞・II級窩洞の 一層目や一括充填に


※1 詳細な照射条件と光硬化深さについては注意事項等情報をご参照ください。 ※2 垂直:0.03g 37℃ 1分間静置

オムニクロマフローバルクの活用イメージ

■バルクフィルタイプならではの活用


バルクフィルとは… 従来のコンポジットレジンと比較して、
一括充填に推奨できるもの。

従来のコンポジットレジン

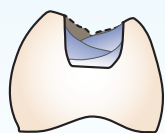

硬化深さ約2mmで、複数回
にわたっての充填が必要


オムニクロマフローバルク

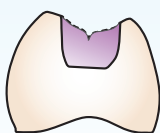

硬化深さ3.5mmで一括充填が可能
※LED 800mW/cm²、20秒の場合

■ハイフロータイプならではの活用


高い流動性を活かした
窩洞一層目への使用。

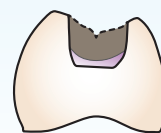

高い流動性で
窩洞の隅角まで
行きわたりやすい。

●イラストはあくまでイメージです。

オムニクロマの球状フィラーがもたらす効果

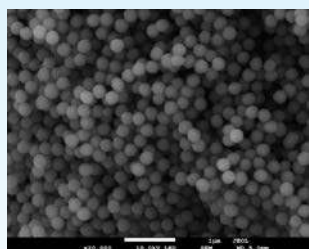

色調適合性の技術など、その他情報は特設サイトにも掲載しております。



<https://www.tokuyama-dental.co.jp/omnichroma/>

■構造色による色調適合



光硬化前



光硬化後

A4人工歯I級窩洞(φ4mm×深さ3.5mm)にボンディング処理後、オムニクロマフローバルクを充填

バルクフィルタイプなら
深さ3.5mmの窩洞でも色調適合

■短時間で優れた研磨性



◀10秒研磨

◀30秒研磨

◀60秒研磨

▲硬化後未処理

オムニクロマフローバルクの硬化体(1cm×1cm)を、研磨ディスク(アルミナ)極細で規定時間研磨。