高強度でしなやか 光透過性の高いファイバーポスト

6 Tokuyama

トクヤマFRポスト

1.22₃ 3.19®

2024年

學回使用 1.4mm **半**回使用 1.4mm 半回使用 1.4mm トクヤマFRポスト(30本) (10本) 標準医院価格 ¥17,800 写真は1.4mmの例です。

トクヤマFRポスト 1.2mm (2本) ¥1,780 相当 (10本入換算)

φ1.0mm ϕ 1.6mm の30本入りからお選びください ※通常30本入りと商品コードが異なります。キャンペーン品をご注文ください。

トクヤマFRポスト 30★

トクヤマFRポスト 歯科根管用ポスト成形品 (管理医療機器)認証番号21700BZY00556000

部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2024年1月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

トクヤマFRポスト増量キャンペ-

+2本キャンペーンセット		+2本キャンペーンセット		+2本キャンペーンセット			+2本キャンペーンセット	
キャンペーン品コード[34642]	セット	キャンペーン品コード[34643]	セット	キャンペーン品コード[[34644]	セット	キャンペーン品コード[34645]	セット
貴歯科医院名		お名前			お届け歯科	商店名		
 ご住所 [〒]								
 TEL	(

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、 ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 トクヤマデンタル

トクヤマFRポスト**1.0mm**(30本)

トクヤマFRポスト**1.2mm**(30本)

000120-54-1182

9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)

トクヤマFRポスト1.4mm(30本)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

トクヤマFRポスト1.6mm(30本)




物性值

曲げ強さ* - 1,122MPa 弹性係数* — 32.7GPa


 $\% \phi 1.4$ mmのトクヤマFRポスト



緻密なグラスファイバーが マトリックスレジンで 強固に束ねられており、 高強度であるとともに しなやかな物性です。

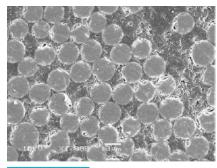



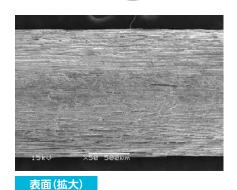

高い光透過性

光透過性が高く、光が届きに くい根管内の光硬化型コア用 レジンの硬化促進が期待でき ます。





X線造影性

同じ厚みのアルミニウム以上 のX線造影性がありますので 試適時の位置確認が容易です。



操作手順(ファイバーポストレジンコア/直接法)(「ボンドマー ライトレスII」、「エステコア」を使用した場合)



トクヤマFRポストにボンド マーライトレスエ 塗布、エアブロー



ポスト孔にボンドマー ライ トレスⅡ塗布、



根管部にTステコアのペー スト (ブルー) 填入



トクヤマFRポスト挿入、 光照射





歯科根管用ポスト成形品

トクヤマ FRポスト

標準医院価格 ¥26,000/セット(30本) (φ1.2mm、φ1.4mm、φ1.6mm 各10本入)

単品 φ1.0mm、φ1.2mm、φ1.4mm、φ1.6mm 各10本入 ¥8,900 各30本入 ¥17,800

※各包装には「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」の トレーサビリティーシールが付属されています。



ご使用の際は必ず注意事項等情報をよくお読みください。